

AFT International Advanced Foot Technology
Ter Stratenweg 50
BE-2520 Oelegem
Belgium



2020-05-29

PRÜFBERICHT / TESTREPORT

Proben-Nr. / <i>sample id number</i> :	SN 29709
Prüfprodukt / <i>test sample</i> :	Material Termolast
Prüfungsnummer / <i>sample number</i> :	2020-1149
Auftraggeber / <i>client</i> :	Prüf- und Forschungsinstitut e.V. (PFI) Marie-Curie-Str. 19 66953 Pirmasens
Hersteller / <i>manufacturer</i> :	AFT International Advanced Foot Technology
Auftragsdatum / <i>date of order</i> :	2020-04-30
Lieferdatum / <i>date of delivery</i> :	2020-05-06
Prüfzeitraum / <i>test period</i> :	2020-05-25 - 2020-05-27
Prüfmethode / <i>test method</i> :	Zytotoxizität von Eluaten gemäß EN ISO 10993-5:2009 Biologische Beurteilung von Medizinprodukten Teil 5: Prüfung auf Zytotoxizität (SOP 09-001) <i>Cytotoxicity of eluates according to EN ISO 10993-5:2009 Biological evaluation of medical devices Part 5: tests for cytotoxicity: in vitro (SOP 09-001).</i>
Information / <i>information</i> :	-

Identifizierung der Probe / identification of the sample

Probennummer / <i>sample id number</i> :	SN 29709
Prüfprodukt / <i>test sample</i> :	Material Termolast
Chargennummer / <i>batch number</i> :	-
Lieferdatum / <i>date of delivery</i> :	2020-05-06
Lagerbedingungen / <i>storage conditions</i> :	die des Herstellers / <i>those of the manufacturer</i>
Aussehen / <i>appearance</i> :	Fotodokumentation im Anhang / <i>photo documentation in the annex</i>
Bestimmungsgemäße Anwendungsart gemäß Herstellerangaben / <i>Intended use according to the manufacturer</i> :	Keine Angaben / <i>no information</i>

Prüfverfahrensbeschreibung / description of the test method

Prüfmethode / <i>test method</i> :	EN ISO 10993-5 (2009) Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 5: Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität EN ISO 10993-5 (2009) Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity SOP 09-001
Prüftemperatur(en) / <i>test temperature(s)</i> :	23.1°C ± 1°C
Rel. Luftfeuchtigkeit / <i>rel. humidity</i> :	39%
Testmaterialbehandlung / <i>sample processing</i> :	Die Prüfung erfolgte im Anlieferungszustand / <i>Sample(s) were tested as delivered</i>
Extraktionsbedingungen / <i>extraction conditions</i> :	EN ISO 10993-12 (2012)
Extraktionsmenge und Volumen / <i>sample amount and volume</i> :	60cm ² Material in 10ml Extraktionsmedium / <i>60cm² material in 10ml extraction medium</i>
Extraktionsmedium / <i>extraction medium</i> :	Saure Schweißlösung (EN) / <i>Artificial acidified sweat solution (EN)</i>
Extraktionsdauer / <i>duration of extraction</i> :	24h
Extraktionstemperatur / <i>temperature of extraction</i> :	37°C ± 1°C

Extrakt / extract:

pH-Werte / <i>pH values:</i>	7.2
Farbe / <i>colour:</i>	keine Veränderung / <i>no change</i>
Präzipitat / <i>precipitate:</i>	keines / <i>none</i>
Behandlung / <i>processing:</i>	keine / <i>none</i>
Lagerung / <i>storage:</i>	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>
Kommentare / <i>comments:</i>	-
Laboranalyse durchgeführt von / <i>lab analysis performed by:</i>	Mrs. Nicole Möller-Titel

Prüfanforderung / test requirement:

EN ISO 10993-5:	Neutral Rot / <i>neutral red</i> Zellvitalität / <i>cell viability</i> ≥ 70%
-----------------	---

Materialien und Methoden / materials and methods

Zellkultivierung / *cell culture*:

L929-Zellen (ATCC CCL 1) sind eine adhärenzte Zelllinie des murinen Bindegewebes. Die Vorratshaltung erfolgt in 250 ml Gewebekulturflaschen. Die Zellen werden alle 3-4 Tage passagiert. Nach der 80. Passage wurde die Vorratshaltung aus der Stammkultur neu angelegt. Zur Testung werden die Zellen in einer Konzentration von 0.5×10^6 Zellen/ml in Microtiter-Zellkulturtestplatten F96 eingesät und 24 h bei 37°C und 5% CO₂ im Brutschrank inkubiert. Das Anzuchtmedium besteht aus MEM mit 9% FBS sowie L-Glutamin, und 1% Antibiotikalösung (Penicillin, Streptomycin).

Stock cultures of L929 cells (ATCC CCL-1), an adherent cell line derived from murine connective tissue, were maintained in 250 mL culture flasks at 37°C in a 5% CO₂ atmosphere. The cells were passaged every 4 days into new culture flasks. Passage number was kept below 80. For the test 0.5×10^6 cells/mL were seeded into a 96 well microtiter culture cluster and incubated for 24h at 37°C and 5% CO₂ atmosphere. The culture medium consists of MEM (Minimum Essential Medium) supplemented with 9% fetal calf serum, 1% antibiotic solution (Penicillin G, Streptomycin sulfate) and L-glutamine.

Exposition / *treatment*:

Nach 24 Stunden Kultivierung der Zellen in Multiwell-Zellkulturschalen lagen die Zellen als Monolayer vor. Nun wurde ein Mediumwechsel mit Testmedium vorgenommen. Dazu wurde das Medium dekantiert und das Prüfmedium vorsichtig hineinpipettiert (100 µl pro Vertiefung). Eine Inkubation für 24 Stunden im Brutschrank schließt sich an.

After 24 hours of incubation the medium was exchanged with the test medium by carefully decanting the medium and adding 100 µL of test medium, followed by incubation for an additional period of 24 hours.

Extrakte / *extracts*:

Extrakte werden gemäß EN ISO 10993-12:2012 hergestellt, wenn nicht anders beschrieben. Extrakte in saurer Schweißlösung werden 2-fach konzentriert hergestellt. Der Extrakt wird danach 1:1 mit komplettem Zellkulturmedium verdünnt um das 100% Testmedium herzustellen. Extrakte werden normalerweise frisch vor der Prüfung hergestellt. Sollte eine Lagerung notwendig sein, wird der Extrakt bei -20°C gelagert (bis zu 48 Stunden), danach bei -80°C (bis zu 2 Wochen).

Extracts are made according to EN ISO 10993-12:2012, unless specified otherwise. Extracts in acidified artificial sweat solution are made at 2x strength and then diluted 1:1 with complete cell culture medium to afford the 100% test medium. Extracts are generally prepared fresh coincident with the test date. In the event that storage becomes necessary the extract is stored at -20°C (< 48h) and after that at -80°C (up to 2 weeks).

Testmedium / *test medium*:

Das Testmedium ist der Extrakt (100%) oder eine Verdünnung davon, wie angegeben, welche mit komplettem Zellmedium hergestellt wurde.

The test medium is either the neat extract (100%) or a dilution thereof prepared with complete cell culture medium, as indicated.

Neutral Rot Methode /
neutral red method:

Vitale Zellen nehmen den Farbstoff Neutralrot auf. Tote Zellen können den Farbstoff nicht aufnehmen und bleiben ungefärbt. Die Farbintensität der Eluationslösung wird photometrisch gemessen.

Viable cells incorporate the dye neutral red. Dead cells do not incorporate the dye and remain unstained. The degree of uptake can be followed by photometrically measuring the release of neutral red upon elution from the cells.

Kontrollen / *controls*:

Als Negativkontrolle wurde Zellmedium ohne Prüflösung inkubiert. Zur Überprüfung der Sensitivität des Testsystems wurde zusätzlich als Positivkontrolle 0,15mg/ml Natriumdodecylsulfat (SDS) in MEM Kulturmedium im Test eingesetzt. (N=9)

Negative controls were cells incubated with MEM medium without any additions. Positive controls were incubated with a 0.15 mg/mL sodium dodecyl sulfate (SDS) in MEM medium. (N=9)

Neutral Rot Ergebnisauswertung /
Neutral red result evaluation:

Die optische Dichte (A_{560}) von 12 Parallelansätzen (Wells) wird ermittelt. Eine Zellvitalität von weniger als 70% bezogen auf die Negativkontrolle gilt als signifikant zytotoxisches Ergebnis.

Optical density (A_{560}) of 12 wells was determined. A viability of less than 70% relative to the negative control is considered to be cytotoxic result.

Reagenzien / reagents

Reagenz / reagent	ID	Hersteller/ manufacturer	Charge / batch	Verfallsdatum / expiration Date
Medium	MEM	BioWest	0055Z	31.01.2021
FBS	Serum	BioChrom	BCBV9856	/
Additive(s)	L-Glutamin / L-glutamine	Biochrom	0279G	31.03.2021
Antibiotic Mix	Pen/Strep	Sigma	018M4825V	/
Kontrolle / Control	SDS	Merck	K49143160734	30.06.2022
Kontrolle / Control (LDHe)	Triton X	Merck	K47606598712	/
Vital Dye	Neutral Red	Roth	60153624	/
Detection Kit	LDHe Reagent Kit	Roche	40490800	28.02.2022

Abkürzungen / abbreviations

MEM	Minimum Essential Medium	<i>Minimum Essential Medium</i>
ATCC	American Type Culture Collection	<i>The American Type Culture Collection</i>
ml	Milliliter	<i>Milliliter / Millilitre</i>
µL	Mikroliter	<i>Microliter</i>
Optische Dichte (A)	Absorption (A)	<i>Absorbance (A)</i>
FBS	Fötales Kälberserum	<i>Fetal Bovine Serum</i>

Abbildung 1 / Figure 1: Boxplot der Zellvitalität / Boxplot of the cell viability

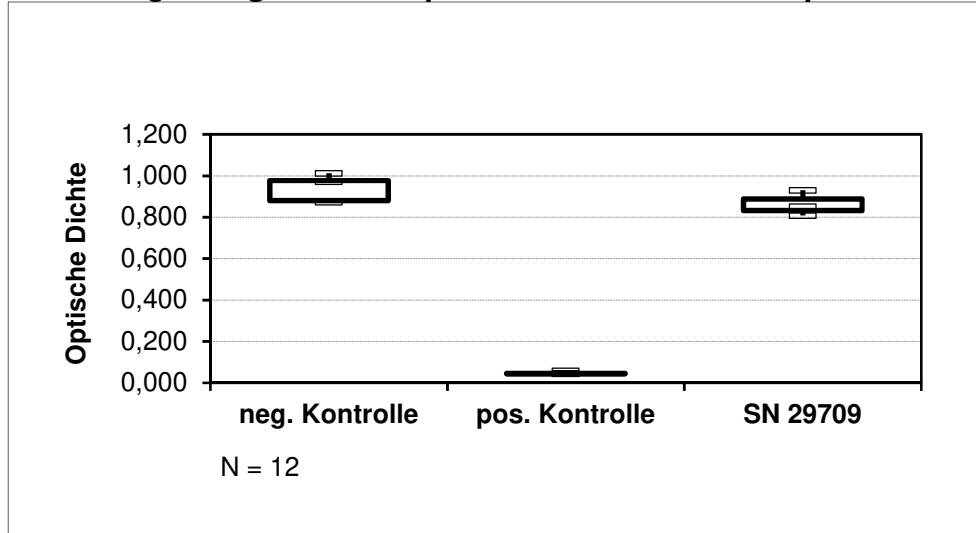


Tabelle 1 / Table 1: Deskriptive Statistik / Descriptive statistics

	N	Durchschnitt (mean)	Zellvitalität (cell vitality) (%)	Minimum	Maximum	Standard- abweichung (std. deviation)	p-value*
Neg. Kontrolle (neg. control)	9	0,946	100,00	0,873	1,012	0,054	-
Pos. Kontrolle (pos. control)	9	0,047	4,94	0,044	0,058	0,004	-
SN 29709	12	0,860	90,91	0,808	0,929	0,039	0,8927

* U-Test nach Mann-Whitney vs. Kontrolle / U test (Mann-Whitney) vs. Control

Analyst(s): Mrs. Nicole Möller-Titel

**Schlussfolgerung /
conclusion:**

Der Extrakt des Produktes „Material Termolast“ resultierte in einer Zellvitalität von mehr als 70% im Vergleich zur Kontrolle und ist deshalb als nicht zytotoxisch zu bewerten.

The extract of the product "Material Termolast" resulted in a cell vitality of more than 70% in comparison to the control and can therefore be considered to be not cytotoxic.

Archivierung:

Eine Ausfertigung des Berichtes wird zusammen mit den Rohdaten im Archiv des Auftragnehmers aufbewahrt.

Archiving:

A copy of the test report will be kept together with the raw data in the contractor's archive.

Hinweis:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfprodukte. Auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes nur mit schriftlicher Genehmigung der HygCen Germany GmbH.

Note:

The test results refer only to the named test samples. Reproduction of any part of this report requires the written permission of HygCen Germany GmbH.



Prof. Dr. med. H.-P. Werner
Head of Scientific-Technical Affairs
Medical Devices



Dr. rer. nat. Antje Stolzenburg
Division Manager Biological Test Methods

Anlage A zum Prüfbericht SN 29709 vom 29.05.2020
Annex A for test report SN 29709 of 2020-05-29

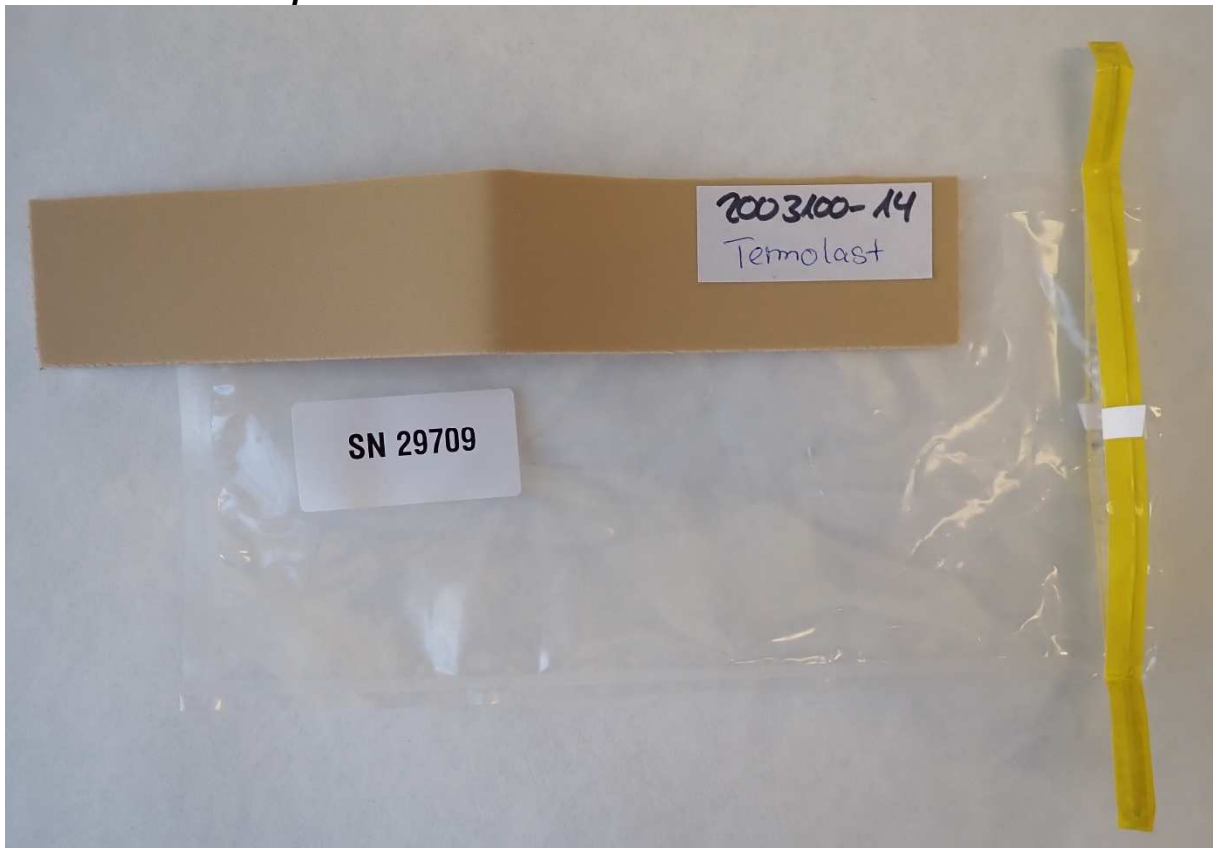


Abbildung 2 / Figure 2: Material Termolast